



LIGHTSHEER

This is how confidence feels



LightSheer® QUATTRO™

Lumenis Lazer Epilasyon sayesinde
özgüveni hissedin

LUMENIS.COM/LIGHTSHEER-QUATTRO

 **Lumenis®**
Energy to Healthcare

Sadece teknoloji geliřtirmiyoruz, özgüven geliřtiriyoruz.

Yaptığımız řey insanların kendileri hakkındaki hislerini deęiřtiriyor.
Sadece istenmeyen tüyleri almakla kalmıyor, řüpheleri, endiřeleri ve
insanlarla, olabilecekleri arasındaki engeli de ortadan kaldırıyoruz.

Özgüven yaratıyor, tasarlıyor ve üretiyoruz.

Özgüven, böyle hissettirir.



Hastaları memnun etmek, işi büyütmek

Lazer epilasyon, hem kadınlar hem de erkekler için en çok aranan invaziv olmayan estetik tedavilerden biridir. Farklı etnik kökenlerden giderek daha fazla insan kalıcı epilasyonu tercih ediyor; etkili, hızlı ve rahat bir tedavi arıyor.

Lazer epilasyon, kliniğinize hasta çeker ve Estetik Dermatoloji dünyasına girmeleri için mükemmel bir basamak görevi görür.

LightSheer QUATTRO ile hasta tedavilerini her bireyin kıl tipine, cilt tipine (bronzlaşmış ve koyu ten dahil) ve yaşam tarzına göre özelleştirebilir ve böylece daha geniş bir demografiye erişebilirsiniz.



805nm & 1060nm
dalga boyları ile
her cilt tipi için



Yükseltilebilir ve
ölçeklenebilir



Kompakt ayak izi
ile taşınabilir



Çok yönlü pigmente
ve vasküler
lezyonların tedavisi



Teknolojimize güvenebilirsiniz.

Mükemmel klinik sonuçlar, iki gelişmiş teknoloji ile güçlendirilmiş LightSheer QUATTRO diyot lazer ile başlar: Yüksek Hızlı vakum destekli teknoloji ve ChillTip™ entegre temas soğutma teknolojisi.

Yüksek Hızlı Vakum Destekli Teknoloji



Etkililik²

Lazer enerjisi daha verimli bir şekilde iletilir.



Güvenlik²

Atış başına daha düşük akış gereklidir.



Daha az ağrı¹

Benzersiz mekanizma tedavi sırasında ağrıyı azaltır.



Tedavi süresi^{1,2}

Jel veya anestezi olmadan hızlı kapsama oranı.




Yüksek Hızlı Başlık

22x35mm

Benzersiz bir ağrı azaltma mekanizması sunar ve jel olmadan çalışır. Geniş vücut bölgelerini hızlı ve rahat bir şekilde tedavi etmek için idealdir.

Nasıl Çalışır:

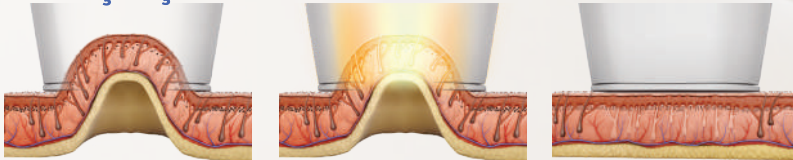

1 İbrahimi OA, Kilmer SL. Epilasyon için büyük spot boyutuna ve vakum destekli emişe sahip 800 nm uzun atımlı diyot lazerin uzun vadeli klinik değerlendirmesi. Dermatol Surg. 2012

2 Xia Y, Moore R, Cho S, Ross EV. Vakum destekli el aletinin 800 nm diyot lazer sisteminin safir soğutmalı el aleti ile karşılaştırmalı olarak epilasyon ve azaltma kullanımı için değerlendirilmesi. J Cosmet Laser Ther. 2010; 12: 264-268.

3 Campos, V. B., Dierickx, C. C., Farinelli, W. A., Lin, T. Y. D., Manuskatti, W., & Anderson, R. R. (2000). 800-nm darbeli diyot lazer ile epilasyon. Journal of the American Academy of Dermatology, 43(3), 442-447.

805nm veya 1060nm dalga boyları ile TM CİLT TİPLERİNİ tedavi edin.

ChillTip Entegre Temaslı Soğutma Teknolojisi



Etkililik^{2,3}

Cildin sıkıştırılması örtüşen kromoforları azaltır.



Gvenlik³


Srekli safir temas soğutması yoluyla epidermal koruma.



Hasta Konforu³

Srekli soğutma konforu önemli ölçde artırır.

Nasıl Çalışır:

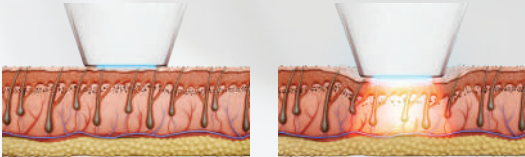

XC

12x12mm

Daha yksek akış seviyeleri gerektiren byk ve kçük alanlar iin bir zm saėlar.



ET

9x9mm

Maksimum hassasiyet gerektiren kçük alanları tedavi etmek iin tasarlanmıřtır.

Biz sonuçlarımıza güveniyoruz, siz de güvenebilirsiniz.

Lumenis'in LightSheer teknolojisi çok sayıda klinik çalışma ve hakemli makalede doğrulanmıştır ve dünya çapındaki müşterilerimiz sürekli olarak yüksek düzeyde hasta memnuniyeti ve tekrarlanabilir sonuçlar bildirmiştir.

Lazer epilasyon, 805nm dalga boyu

Önce

Sonra



"LightSheer®'i diğerlerinden ayıran şey, sağlayıcılara hastaları rahatça ve yüksek derecede etkinlikle tedavi etme konusunda verdiği güven. Bu hem hizmet sağlayıcı hem de hasta için genel bir kazan-kazan durumu."

Pigmente lezyonlar, 805nm dalga boyu



Kırışıklık azaltma, 1060nm dalga boyu



Lazer epilasyon, 1060nm dalga boyu



1. Mitchel Goldman, 2, 3. Lumenis Ltd. M.D. 4. Sushil Tahiliani, M.D. tarafından sağlanmıştır.

Uyarılar ve Riskler

Tedavi bölgesinde aşağıdaki durumlar olan hastalarda tedavi denenmemelidir: herhangi bir aktif enfeksiyon, enflamatuvar cilt koşulları, Displastik nevüsler, dövme, aktif uçuklar, açık yırtıklar veya sıyrıklar, viral, fungal veya bakteriyel hastalıklar veya post enflamatuvar hiperpigmentasyon öyküsü. Epilasyon, pigment koyulaşması/ artması, vasküler lezyonlar ve kırışıklık pigmentli lezyonlar için lazer tedavisinin en yaygın anlık yanıtları eritem, ödem, perifoliküler ödem ve perivasküler ödem, vasküler ağartma, hiperpigmentasyon ve hipopigmentasyon veya tedavi edilen alanların dokusal değişiklikleridir.

Kontrendikasyonların ve risklerin tam listesi LightSheer QUATTRO kullanım kılavuzunda bulunabilir.

Lumenis ile yolculuğunuz daha yeni başlıyor

LightSheer QUATTRO ile işinizin büyümesini istiyoruz. İhtiyacınız olan tüm eğitimi almanızı ve en güncel klinik materyalleri edinmenizi sağlayan bir destek paketi sunuyoruz. Doğrudan tüketiciye yönelik pazarlama faaliyetlerimiz, LightSheer'i lazer epilasyon söz konusu olduğunda tercih edilen tedavi olmasını sağlayarak markayı desteklemektedir.



Lumenis Uygulama Bulucu

Her ay binlerce hasta tedavi sağlayıcıları arıyor. Kliniğinizi Lumenis Uygulama Bulucu'ya kaydederek kliniğinizi bulmalarına yardımcı olun. Bu dizini tanıtmak için influencer'lar, sosyal medya ve viral videolar aracılığıyla kampanyalar yürütüyoruz.



Lumenis online

Tüketicilerin estetik tedavileri hakkında pek çok sorusu bulunmaktadır. Hastalara yönelik özel web sitemiz, onlara tedavilere devam etmek için ihtiyaç duydukları güvenceyi ve güveni verecektir.



Ekip Eğitimi

Sistemi kuruyor ve personelinizi eğitiyoruz, böylece cilt tiplerini ve koşullarını değerlendirebiliyor ve her bir hasta için mükemmel tedavi planını oluşturabiliyoruz. 'Uzman' klinik eğitimi, konsültasyon ve tedavilerin güven içinde ele alınacağı anlamına gelir.



En Değerli Kaynağınız

Özel temsilciniz size bir e-posta, metin veya telefon uzaklığında. Kendinizi Lumenis ailesinin bir parçası olarak hissetmenizi istiyoruz, bu nedenle lütfen istediğiniz zaman bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Size 24 saat içinde geri dönmek için her zaman elimizden geleni yapacağız.



Kliniğinizi Markalaştırın

Bir Lumenis müşterisi olarak Lumenis Physician Portal'a erişiminiz olacaktır. Burada broşür ve poster gibi materyalleri bulabilirsiniz. Ayrıca çok sayıda klinik ve ürün bilgisine de erişebilirsiniz.



Kapsamlı Hizmet Ağı

Tıbbi ekipman onarımı ve bakımı için yüksek kaliteli, kapsamlı hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. Lumenis hizmeti size gönül rahatlığı sağlar, böylece ekipman yerine hasta bakımına odaklanabilirsiniz.

Özellikler

LightSheer QUATTRO	HS 22 X 35 mm	XC 12 X 12 mm	ET 9 X 9 mm
Lazer Tipi	AlGaAs Diode Arrays	AlGaAs Diode Arrays	AlGaAs Diode Arrays
Dalga Boyu	805 nm 1060 nm	805 nm 1060 nm	805 nm 1060 nm
Tekrarlama Hızı	3 Hz'e kadar	3 Hz'e kadar	3 Hz'e kadar
Atış Tekrarı	1-3 atış	1 Atış	1 Atış
Akış	805 nm: 4.5-12 J/cm ² 1060 nm: 4.5-14 J/cm ²	10-40 J/cm ²	10-100 J/cm ²
Atış Aralığı	30-400 ms	5-400 ms	5-400 ms
Tepe Gücü	2310 W	2200 W	1620 W
Ön Ayar Parametreleri	Var	Var	Var
Konfor Yönetimi	Vakum destekli(18 inHg'e kadar)Chilltip temaslı soğutma(2°C)	Chilltip temaslı soğutma(2°C)	Chilltip temaslı soğutma (2°C)
Yerinde Servis	Var; değiştirilebilir başlık	Var; değiştirilebilir başlık	Var; değiştirilebilir başlık
Bağlantı	Servis ve destek için uzaktan bağlantı		
Platform Özellikleri			
Elektriksel	100-240 VAC +/-10%, 10 A 50/60 Hz. Tek fazlı topraklı çıkış		
Ağırlık	Konsol ağırlığı: 36 kg (79.4 lbs.)		
Boyutlar (GxDxY)	51 x 60 x 42 cm; (20.1 x 23.6 x 16.55 inç)		

Kullanım endikasyonları

Anjiyomlar, hemanjiyomlar, telenjektazi ve diğer iyi huylu vasküler lezyonlar ve bacak damarları dahil olmak üzere iyi huylu vasküler lezyonların tedavisi. Epilasyon, kalıcı tüy azaltma* ve Pseudofolliculitis Barbae (PFB) tedavisi. İyi huylu pigmentli lezyonların tedavisi. Kırışıklıkların tedavisi (sadece 1060nm başlıklar için). Bronzlaşmış cilt dahil olmak üzere tüm cilt tiplerinde (Fitzpatrick cilt tipi I-VI) kullanım.

* Kalıcı tüy azalması, bir tedavi rejiminin tamamlanmasından 6, 9 ve 12 ay sonra ölçüldüğünde yeniden çıkan tüylerin sayısındaki uzun vadeli, istikrarlı azalma olarak tanımlanır.

Ticari Markalar

LightSheer, LightSheer QUATTRO, LightSheer QUATTRO logosu, ChillTip, Pulse Width (OptiPulse), AutoPace, Lumenis ve Lumenis logosu, Lumenis şirketler grubunun ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Lumenis Hakkında

Lumenis cerrahi, oftalmoloji ve estetik pazarları için minimal invaziv klinik çözümler alanında küresel bir liderdir ve lazer, yoğun atımlı ışık (IPL) ve radyo frekansı (RF) dahil olmak üzere enerji tabanlı teknolojiler geliştirme ve satma konusunda dünyaca ünlü bir uzmandır. Lumenis'in çıkar açan ürünleri 50 yılı aşkın süredir tıbbi tedavileri yeniden tanımlamış ve çok sayıda teknolojik ve klinik altın standart belirlemiştir.

LASER CLASS 4/IV DIODE LASER For LightSheer DESIRE / QUATTRO QUATTRO / QUATTRO Light WAVELENGTH: 1040-1080 nm PULSE ENERGY: 58 J max PULSE DURATION: 5-300 ms PULSE RATE: 3 Hz max VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS 4 LASER PRODUCT per EN 60825-1:2007/2014 CLASS IV LASER PRODUCT Complies with 21 CFR 1040.10 & 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, Dated June 24, 2007 LB-20071405_C	LASER CLASS 4/IV DIODE LASER For LightSheer DESIRE / QUATTRO QUATTRO / QUATTRO Light WAVELENGTH: 1040-1080 nm PULSE ENERGY: 81 J max PULSE DURATION: 5-400 ms PULSE RATE: 3 Hz max VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS 4 LASER PRODUCT per EN 60825-1:2007/2014 CLASS IV LASER PRODUCT Complies with 21 CFR 1040.10 & 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, Dated June 24, 2007 LB-20071405_C	LASER CLASS 4/IV DIODE LASER For LightSheer DESIRE / QUATTRO QUATTRO / QUATTRO Light WAVELENGTH: 1040-1080 nm PULSE ENERGY: 108 J max PULSE DURATION: 30-400 ms PULSE RATE: 3 Hz max VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS 4 LASER PRODUCT per EN 60825-1:2007/2014 CLASS IV LASER PRODUCT Complies with 21 CFR 1040.10 & 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, Dated June 24, 2007 LB-20071405_C
LASER CLASS 4/IV DIODE LASER For LightSheer DESIRE / QUATTRO QUATTRO / QUATTRO Light WAVELENGTH: 790-830 nm PULSE ENERGY: 81 J max PULSE DURATION: 5-300 ms PULSE RATE: 3 Hz max VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS 4 LASER PRODUCT per EN 60825-1:2007/2014 CLASS IV LASER PRODUCT Complies with 21 CFR 1040.10 & 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, Dated June 24, 2007 LB-20071405_C	LASER CLASS 4/IV DIODE LASER For LightSheer DESIRE / QUATTRO QUATTRO / QUATTRO Light WAVELENGTH: 790-830 nm PULSE ENERGY: 81 J max PULSE DURATION: 5-300 ms PULSE RATE: 3 Hz max VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS 4 LASER PRODUCT per EN 60825-1:2007/2014 CLASS IV LASER PRODUCT Complies with 21 CFR 1040.10 & 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, Dated June 24, 2007 LB-20071405_C	LASER CLASS 4/IV DIODE LASER For LightSheer DESIRE / QUATTRO QUATTRO / QUATTRO Light WAVELENGTH: 790-830 nm PULSE ENERGY: 92 J max PULSE DURATION: 30-400 ms PULSE RATE: 3 Hz max VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION AVOID EYE OR SKIN EXPOSURE TO DIRECT OR SCATTERED RADIATION CLASS 4 LASER PRODUCT per EN 60825-1:2007/2014 CLASS IV LASER PRODUCT Complies with 21 CFR 1040.10 & 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, Dated June 24, 2007 LB-20071405_C

Lumenis LTD
Yokneam Industrial
Park Hakidma Street 6,
P.O.B. # 240 Yokneam
2069204, İsrail
T +972 4 959 9000

Lumenis (Almanya) GmbH
Heinrich-Hertz-Str 3 D-63303
Dreieich-Dreieichenhain
ALMANYA
T +49 (0) 6103 8335 0

EMEA
Dreieich Dreieichenhain,
Almanya
T +49 6103 8335 0
F +49 6103 8335 300

Roma, İtalya
T +39 06 90 75 230
F +39 06 90 75 269

Hertfordshire, Birleşik
Krallık
T +44 20 8736 4110
F +44 20 8736 4119

JAPONYA
Tokyo, Japonya
T +81 3 6743 8300
F +81 3 6743 8301

AMERİKA
San Jose, CA, ABD
T +1 408 764 3000
+1 877 586 3647
F +1 408 764 3999

ASYA PASİFİK
Pekin, Çin
T +86 10 5737 6677
F +86 10 5737 6767

Gurgaon, Hindistan
T + 91 124 422 07 95

Kowloon, Hong Kong
T + 852 217 428 00
F + 852 272 251 51

© 2019 Lumenis Ltd., Tüm Hakları Saklıdır.

